

# Hapeka Sitzkissen



# Previa Sitzkissen

## „Luftzellen“ zur besseren Positionierung



Luftzellen im Inneren



Handpumpe mit Manometer

### individuelle Einstellung

**BESONDERHEITEN** - Die individuelle Einstellung erfolgt mittels einer Handpumpe mit Manometer, während der Patient auf dem Kissen sitzt. Dadurch wird eine optimale Druckverteilung erreicht und eine verbesserte Sitzpositionierung möglich (z. B. bei einer Halbseitenlähmung, bei Amputation, bei Gleichgewichtsstörungen, usw.)

Das neue Rollstuhlkissen basiert ebenfalls, wie die Optima Matratze auf dem tunnelförmigen Luftzellensystem und ist in Regelzonen justierbar. Geeignet für Patienten mit höchstem Risiko zur Dekubitusprophylaxe und -therapie sowie zur Schmerztherapie VAS 10.

Lieferbar in verschiedenen Standardgrößen, sowie in Sondermaßen. Inkl. PU Inkontinenzbezug und Visco-Topping. Für Patientengewichte bis max. 250 kg.

#### Technische Daten

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Abmessungen:      | 38 x 38 x 11 cm (Größe S) |
|                   | 42 x 42 x 11 cm (Größe M) |
|                   | 42 x 45 x 11 cm (Größe L) |
| Produktgewicht:   | 2 kg                      |
| Patientengewicht: | bis 250 kg                |

1 2 3 4 Dekubitus Grad


1 3 6 10 VAS Skala Schmerz

#### Bezüge

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Material:  | PU Inkontinenz                                       |
| Farben:    | schwarz                                              |
| Reinigung: | waschbar bis 95° C<br>für Wischdesinfektion geeignet |

## anatomisch geformtes Sitzkissen

### zur besseren Positionierung

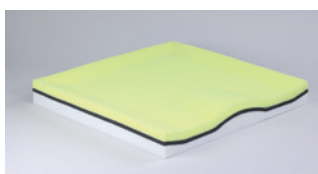

Kern gelb



Kern rot

Das Visco Contour-Sitzkissen ist anatomisch geformt zur besseren Positionierung. Es hat einen PU beschichteten Bezug, die Stoff Frontseite sorgt für besseres Mikroklima, Kissenunterseite – Anti-Rutsch mit Trageschleufe.

#### Technische Daten

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen:      | 40 x 43 x 8 cm (Größe 1)             |
|                   | 43 x 43 x 8 cm (Größe 2)             |
|                   | 45 x 43 x 8 cm (Größe 3)             |
|                   | 48 x 43 x 8 cm (Größe 4)             |
|                   | 38/51 x 51/38 x 8 cm                 |
| Produktgewicht:   | 2 kg                                 |
| Patientengewicht: | 25 - 85 kg (gelb), 60 - 140 kg (rot) |



1 2 3 4 Dekubitus Grad

1 4 6 10 VAS Skala Schmerz



# Viscorelax Sitzkissen

## Das variable Sitzkissen

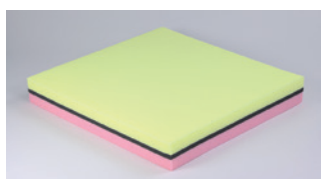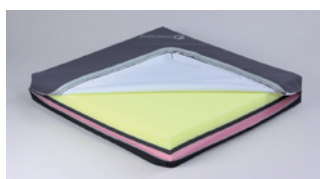

### Kern mit zwei Oberflächen

**BESONDERHEITEN** - Mit der gelben Oberfläche wird ein Patientengewicht von 25 – 75 kg überbrückt, mit der roten Oberfläche ein Gewichtsbereich von 60 – 125 kg. Innerhalb der Überschneidung des Bereiches kann das Kissen zur Anpassung des Patientenkomforts gewendet werden. Die graue, mittlere Schicht verhindert zuverlässig ein Durchsitzen des Schaumkerns und optimiert die Lastenverteilung.

#### Bezüge

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Material:    | Bolan/PU Inkontinenz                                 |
| Farben:      | grau/schwarz                                         |
| Reinigung:   | waschbar bis 95° C<br>für Wischdesinfektion geeignet |
| Sicherheit:  | Bezug schwer entflammbar                             |
| Ausstattung: | sanitized                                            |

- zur Dekubitus- und Schmerztherapie
- mit PU/Inkontinenzbezug

Das Viscorelax Sitzkissen hat einen neu entwickelten 3-schichtigen Schaumkern. Sein Kern hat zwei unterschiedliche viscoelastische Oberflächen, und kann zur Anpassung an den Patienten gewendet werden.

Im Lieferumfang ist der PU beschichtete Inkontinenzbezug (dunkelblau) enthalten.



- Neuentwickelter 3-schicht Viscorelax Schaumkern
- Zwei unterschiedliche Oberflächenhärten für Patienten mit 25 – 75 kg (gelbe Seite) oder 60 – 125 kg (rote Seite) Körpergewicht
- Inkontinenzbezug serienmäßig, er ist wischdesinfizierbar und auch für die Maschinenwäsche bis 95 °C geeignet
- Alternativ Stoffbezug mit Reißverschluss erhältlich
- Drei Standardgrößen mit Preisvorteil und sofortiger Lieferung
- Alle anderen Maße werden passgenau angefertigt

#### Technische Daten


|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen:      | 40 x 42 x 6 cm (Größe 1)<br>42 x 44 x 6 cm (Größe 2)<br>44 x 48 x 6 cm (Größe 3)<br>24/70 x 70/24 x 6 cm (Maßkissen) |
| Produktgewicht:   | ca. 1 kg                                                                                                             |
| Patientengewicht: | bis 125 kg                                                                                                           |
| Kern:             | autoklavierbar 110° C                                                                                                |

|   |   |    |   |                   |
|---|---|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3  | 4 | Dekubitus Grad    |
| 1 | 5 | 10 |   | VAS Skala Schmerz |

# ViscoStart Sitzkissen

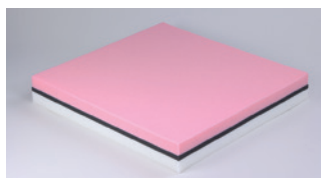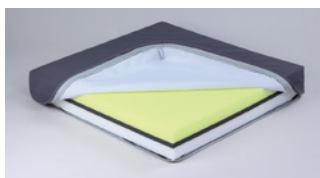

- Zur Dekubitus- und Schmerztherapie
- Mit PU/Inkontinenzbezug
- Bezug mit Anti-Rutsch-Unterseite

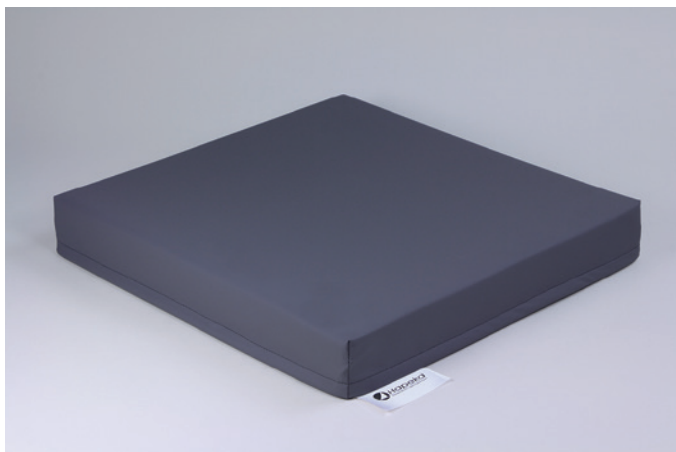

Das ViscoStart Sitzkissen hat sich aus dem bewährten Viscorelax Sitzkissen entwickelt. Die viscoelastische Sitzfläche wird je nach Patientengewicht oder Schmerzempfindung gewählt. Durch die eindeutige Zuordnung der Sitzoberfläche ist es möglich die Unterseite mit einem Anti-Rutsch-Belag zu versehen. So schließen sich Sitzkomfort und Sicherheit nicht aus.

Mit der gelben Oberfläche wird ein Patientengewicht von 25 – 75 kg überbrückt, mit der roten Oberfläche ein Gewichtsbereich von 60 – 140 kg. Die graue, mittlere Schicht verhindert zuverlässig ein Durchsitzen des Schaumkerns und optimiert die Lastenverteilung.

Sondermaße auf Anfrage.

#### Technische Daten

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen:      | 40 x 42 x 6 cm gelb (Größe 1)<br>42 x 44 x 6 cm gelb/rot (Größe 2)<br>44 x 48 x 6 cm rot (Größe 3)<br>24/70 x 70/24 x 6 cm (Maßkissen) |
| Produktgewicht:   | ca. 1 kg                                                                                                                               |
| Patientengewicht: | 25 - 75 kg<br>60 - 140 kg (Größe 3)                                                                                                    |
| Kern:             | autoklavierbar 110° C                                                                                                                  |

|   |   |   |   |                |
|---|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Dekubitus Grad |
|---|---|---|---|----------------|

|   |   |   |    |                   |
|---|---|---|----|-------------------|
| 1 | 4 | 6 | 10 | VAS Skala Schmerz |
|---|---|---|----|-------------------|


## Rückenlehne

**BESONDERHEITEN** - Das VisoStart Sitzkissen gibt es mit einer Rückenlehne, die komplett im Bezug integriert ist.

#### Bezüge

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Material:    | Bolan/PU Inkontinenz Antirutsch                      |
| Farben:      | grau                                                 |
| Reinigung:   | waschbar bis 95° C<br>für Wischdesinfektion geeignet |
| Sicherheit:  | PU Bezug schwer entflammbar                          |
| Ausstattung: | sanitized                                            |

# Ortho Sitzkissen

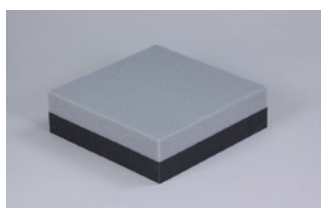

## zwei verschiedene Höhen

**BESONDERHEITEN** - 6 cm Höhe für Patienten mit 30 kg bis 125 kg Körpergewicht, 10 cm Höhe für Patienten mit 45 kg bis 155 kg Körpergewicht

#### Bezüge

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Material:    | Bolan/PU Inkontinenz Antirutsch                      |
| Farben:      | grau oder schwarz                                    |
| Reinigung:   | waschbar bis 95° C<br>für Wischdesinfektion geeignet |
| Sicherheit:  | schwer entflammbar                                   |
| Ausstattung: | sanitized                                            |

- orthopädisch geeigneter 2-schichtiger Schaumkern
- Inkontinenzbezug mit Anti-Rutsch Unterseite ist serienmäßig, welcher wischdesinfizierbar und auch für die Maschinenwäsche bis 95 °C geeignet ist
- Stoffbezug/Anti-Rutsch in schwarz mit Reißverschluss erhältlich
- Drei Standard Größen mit Preisvorteil und sofortiger Lieferung
- Alle anderen Maße werden passgenau angefertigt

#### Technische Daten

|                   |                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen:      | 40 x 42 x 6 /10cm (Größe 1)<br>42 x 44 x 6 /10cm gelb/rot (Größe 2)<br>44 x 48 x 6 /10cm rot (Größe 3)<br>24/70 x 70/24 x 6/10 cm (Maßkissen) |
| Produktgewicht:   | ca. 0,5 kg                                                                                                                                    |
| Patientengewicht: | 30 - 125 kg (6 cm Höhe)<br>45 - 155 kg (10 cm Höhe)                                                                                           |
| Kern:             | autoklavierbar 110° C                                                                                                                         |